

KaVo. Турбинные, прямые и угловые наконечники

Разумный выбор знатоков

Smart Series



Турбина POWERtorque LUX 646 B

Угловой наконечник INTRAmatic 23 ES

Угловой профилактический наконечник
INTRAmatic Profy 31 ES

SONICflex 2000 N



KaVo. Dental Excellence.

Испытанное временем, надежное качество от KaVo



Качество KaVo

Опыт, накопленный в течение 100 лет, и более **пяти миллионов наконечников**, проданных во всем мире, подтверждают высокое качество продукции фирмы KaVo:

- > В производстве нашей продукции мы делаем наибольший акцент на точности, у нас очень высокие стандарты качества. Для обеспечения высококачественного результата сборка инструментов производится в стерильном цехе завода в г. Биберахе.
- > До 70% изготовленных другими производителями наконечников требуют серьезного ремонта в первые четыре года, в сравнении лишь **30%** наконечников, произведенных KaVo, нуждаются в подобном ремонте. Это безусловный показатель **качества инструментов** и, соответственно, лидирующих позиций компании KaVo на стоматологическом рынке (источник: опрос GfK ZaBus, март 2009 года).
- > **98% повторных покупок** отражают уровень **полного удовлетворения** стоматологов качеством нашей продукции.
- > **Регулярная сертификация** обеспечивает постоянный высокий уровень качества. Компания KaVo сертифицирована в соответствии с EN ISO 9001 и EN ISO 13485.



Преимущества системы KaVo

Эффективность и надежность вложений:

- > Модернизируйте свой наконечник, заменив обычную галогенную лампочку на светодиод KaVo MULTI LED, **не совершая лишних трат.**
- > **Обратите внимание на необходимость запасных частей** – их наличие значительно увеличивает защиту Ваших вложений.
- > Во всех новых разработках мы ставим акцент на системность решений от KaVo, позволяющую Вам модифицировать Ваше оборудование наиболее **выгодным** способом.



Инновации KaVo

Более чем 2 200 патентов и зарегистрированных инновационных разработок в области производства стоматологического оборудования - яркий вклад в ежедневный успех и продвижение компании KaVo:

- > **KaVo COMFORTdrive**, первый угловой наконечник со встроенным электрическим двигателем, сочетает в себе мощность турбины и легкость углового наконечника.
- > **Заменяемый KaVo Spray микрофильтр** оптимизирует охлаждение аэрозоля и уменьшает стоимость услуг.
- > **Автоматический клапан регулировки давления** обеспечивает постоянное высокое качество работы, одновременно поддерживая длительный срок службы.
- > **Патентованные углы головки и колена наконечника KaVo, соответственно в 100° и 19°**, обеспечивают оптимальный доступ к области препарирования и обработки.



Безопасность KaVo

Компания KaVo уделяет большое внимание **безопасности лечения** и работы с оборудованием, защищает стоматологов, ассистентов и пациентов во время лечения. Как KaVo добивается этого, видно из нескольких практических примеров:

- > **Сила удержания цанги** до 30 Н намного превышает любые стандартные требования и обеспечивает надежную фиксацию боров.
- > **Инновационные гигиенические решения**, такие как встроенные клапаны обратного всасывания в турбинах серии GENTLEsilence и легкоочищаемые и стерилизуемые поверхности, защищают от перекрестной контаминации.

KaVo *Smart Series*



1. Качество от KaVo, проверенное временем.
2. Все преимущества инструментов KaVo.
3. Доступная цена.



KaVo. Dental Excellence.

KaVo *Smart Series*

Доступная цена продукции KaVo – наконечники серии KaVo Smart.

Тот, кто хочет подниматься выше и выше, должен иметь хороший фундамент. Серия инструментов KaVo Smart предлагает Вам отличные условия для его постройки. Войдите в мир стоматологических инструментов KaVo и испытайте их качество и надежность.

Инструменты серии Smart – разумный выбор знатоков.



1. Качество от KaVo, проверенное временем.

- > Познакомьтесь с миром инструментов KaVo - одного из ведущих производителей стоматологических инструментов в мире.




2. Все преимущества инструментов KaVo.

- > **Мощный крутящий момент** для быстрой, эффективной работы.
- > **Стандарты безопасности KaVo.**
- > **Эффективность и безопасность работы.**



3. Доступная цена.

- > **Признанное качество KaVo** по доступной цене.

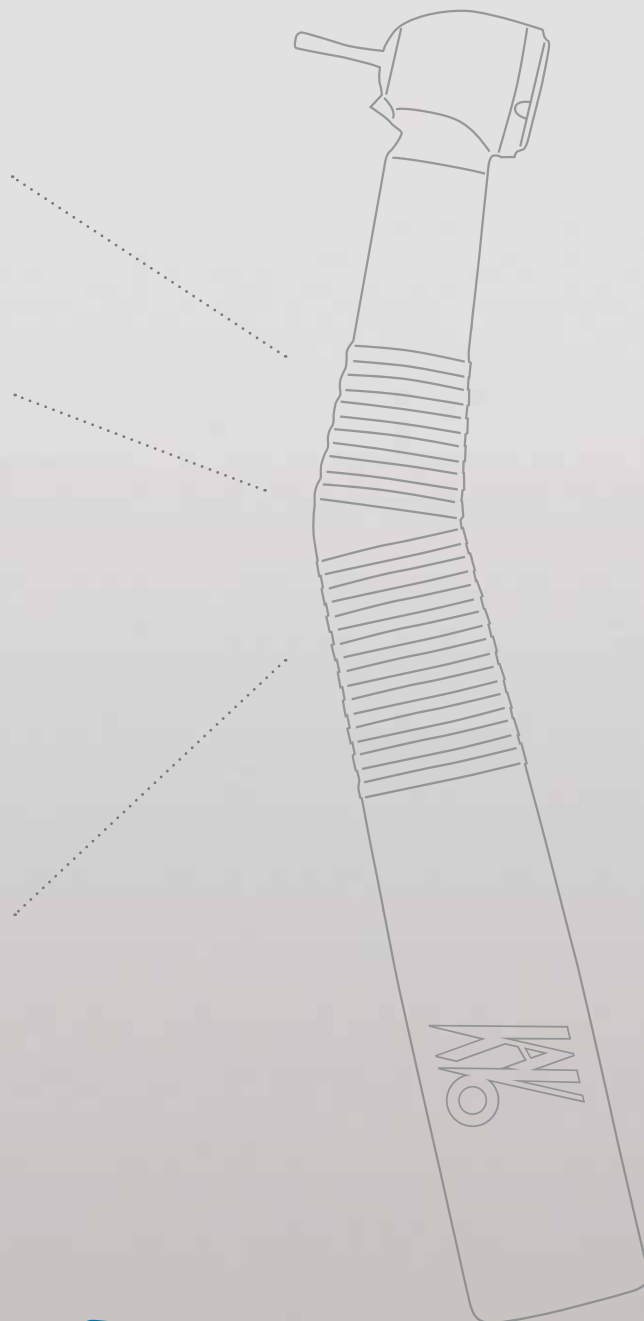

12 месяцев гарантии

Турбинные наконечники KaVo – мощные во всех случаях



POWERtorque 646 B

- > **Мощность 15 Вт.**
- > **Раздельная подача воздуха и воды** для улучшения охлаждения бора.
- > **Опволоконный световод KaVo** с длительным сроком службы.
- > **Кнопочная цапга** для быстрой замены бора.
- > **Высокий уровень безопасности** благодаря удерживающей силе цапги до 30 Н.

кат. № 1.001.7522 (646 B) с подсветкой.
кат. № 1.001.7523 (646 C) без подсветки.



COMPACTtorque 636

- > Для удобного захвата – **оригинальная насечка KaVo** на грифе турбины.
- > Возможность использования разъемов Борден с 2 отверстиями или Мидвест с 4 отверстиями.

кат. № 0.553.0810 (636) с разъемом на 2 отверстия.
кат. № 0.553.0800 (636 P) с разъемом на 2 отверстия и кнопочным зажимом.
кат. № 0.553.0830 (636 C) с разъемом на 4 отверстия.
кат. № 0.553.0820 (636 CP) с разъемом на 4 отверстия и кнопочным зажимом.



Переходник MULTIflex LUX 465 LRN

- > Совместимость со многими наконечниками.
- > **Экономия средств**, так как не потребуется закупка нового оборудования, просто замените галогенную лампочку на светодиод KaVo MULTI LED.

Для всех пневматических наконечников KaVo с разъемом MULTIflex, SONICflex, PROPHYflex, CORONAflex, RONDOflex.

кат. № 0.553.1550 (465 LRN) с регулировкой спрея.
кат. № 1.001.7599 (460 LE) без регулировки спрея.



Серия инструментов INTRAmatic ES Series – качество, достойное уважения

- > **Гриф наконечника гладкий**, без соединительных швов и бороздок, что предотвращает загрязнение.
- > **Сбалансированное управление** и хороший захват.
- > **Увеличение рабочего поля в области** моляров благодаря углу наклона головки в 100 градусов.
- > **Кнопочная цанга.**



INTRAmatic 14 ES

- > Коэффициент передачи 4:1.
- > **Для контругловых боров.**

кат. № 1.003.4831



INTRAmatic 20 ES

- > Коэффициент передачи 1:1.
- > **Для контругловых боров.**

кат. № 1.003.4830 с внешней подачей спрея..



INTRAmatic 10 ES

- > Коэффициент передачи 1:1.
- > **Для прямых боров.**
- > **Безопасная работа** благодаря удерживающей силе цанги до 40 Н.

кат. № 1.003.1111 с внешней подачей спрея.

Основа идеальной профилактики



INTRAmatic 31 ES

- > Понижающий коэффициент 4:1
- > Для **надевающихся и навинчивающихся профилактических насадок.**

кат. № 1.003.1109.



SONICflex 2000 N

- > Инструмент для удаления зубного камня с частотой **6000 Гц.**
- > **Амплитуда колебаний в 160 мкм** для мягкого и эффективного снятия загрязнений при помощи эллиптических движений насадки.
- > Выбор более **50 наконечников** для широкого спектра применений.

кат. № 0.571.5020.

QUATTROcare 2104 / 2104 A – позаботьтесь о своих инструментах!



QUATTROcare 2104 / 2104 A

- > Программно управляемый прибор для чистки, смазки и ухода за четырьмя наконечниками и/или турбинами одновременно.
- > Обработка четырех наконечников **занимает всего 60 секунд.**
- > **Увеличивает срок службы** наконечников.

2104 – кат. № 0.411.7600
2104A – кат. № 0.411.7800



KaVo Spray

- > **Ручной** уход за наконечниками.
- > **Эффективная защита** инструментов и воздушных моторов.

кат. № 0.411.9640.



KaVo. Турбинные, прямые и угловые наконечники

Определиться с выбором теперь легко!
Уверенность в выборе –
уверенность в будущем.

KaVo Master, KaVo Expert, KaVo Smart – идеальные наконечники
для каждого стоматолога.



KaVo
Master Series

Настоящие мастера не знают компромиссов

- Высочайшее качество работы
- Максимальный комфорт при лечении
- Высокая удовлетворенность пациентов



KaVo
Expert Series

Настоящие эксперты всегда уверены в своих силах

- Превосходная надежность
- Высочайшая эффективность
- Исчерпывающий ассортимент



KaVo
Smart Series

Разумный выбор знатоков

- Качество от KaVo, проверенное временем
- Все преимущества инструментов KaVo
- Доступная цена

